

Surgical Face Mask – Type IIR

Instructions for use ENGLISH



PUTTING MASK ON

- 1 Open mask fully
- 2 Place the mask over nose and mouth with internal metal nose strip up
- 3 Place elastic straps behind the ears
- 4 Use both hands to form a perfect fit by pressing the internal metal nose strip along nose

CAUTION: If you CANNOT achieve a proper fitting, DO NOT enter the contaminated area

TAKING MASK OFF

- 1 DO NOT TOUCH the front of the mask, it might be contaminated
- 2 Remove by unhooking the straps from behind the ears
- 3 Dispose of mask as instructed by your organisation's waste management protocols
- 4 Wash your hands

PPE Testing Standards:

- Type IIR
- EN14683:2019
- CE marked

Materials:

- Three ply construction of non-woven filtration material
- Elasticated fastenings located to fit behind the ears - attached
- Nose clip - internal

Packaging:

- Packing: 50 face masks per box, 20 boxes per carton

Country of Origin:

- Made in the UK

Product Code
ORV+MA10N+04


CE 0120



✓ Store in a cool dry area
away from natural sunlight
and off the floor



Munskydd– Typ IIR BRUKSANVISNING SWEDISH

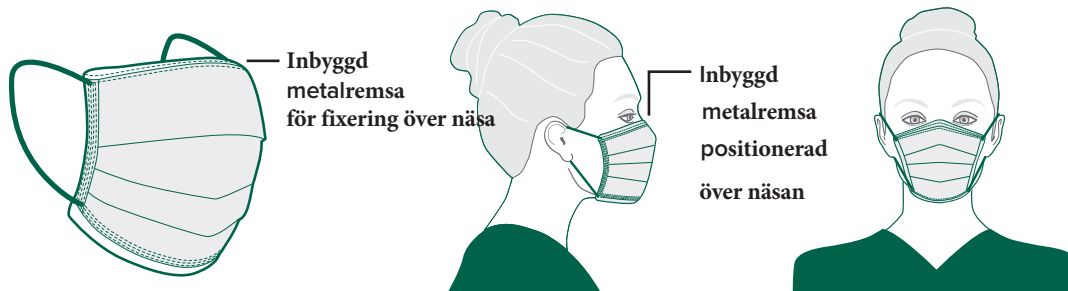

Sätta på munskyddet

- 1 Öppna munskyddet
- 2 Placera munskyddet över mun och näsa med metalremsan över näsryggen
- 3 Placera de elastiska remmarna bakom öronen
- 4 Använd händerna för att forma metalremsan över näsryggen för en individuell passform

WARNING: Om du inte kan få en bra passform, försök inte justera munskyddet från insidan!

Ta av munskyddet

- 1 RÖR INTE framsidan av munskyddet, Det kan vara kontaminerat.
- 2 Ta bort remmarna bakom öronen
- 3 Hantera använda munskydd enligt de lokala föreskrifter som gäller för avfall som kan vara kontaminerat
- 4 Tvätta händerna

PPE Testing Standards:

- Type IIR
- EN14683:2019
- CE marked

Material:

- Trelagers konstruktion av non-woven filtrations material
- Elastiska remmar
- Näsklämma i metal

Packad:

- Packad: 50 munskydd per box, 20 boxar per kartong

Ursprungsland:

- Made in the UK

Tillverkarens artnr:

ORV+MA10N+04

Distributörens artnr:

5006010





✓ Förvaras svalt och torrt, skyddas från solljus.



Kirurgisk ansigtssmask – Type IIR

Brugermanual DANISH

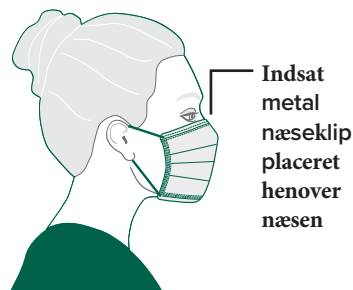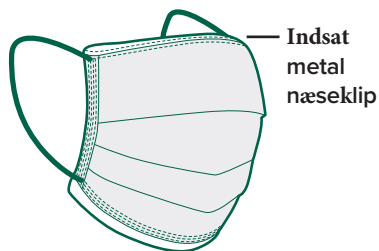

TAG MASKEN PÅ

- 1 Åbn masken helt
- 2 Placer masken over næse og mund, med metal næse klippen opad
- 3 Placer elastik stropperne bag ørerne
- 4 Brug begge hænder til at lave en perfekt tilpasning af næseklippen langs næsen

ADVARSEL: Hvis det er UMULIGT at opnå en perfekt pasform, Så beskytter masken IKKE

TAG MASKEN AF

- 1 RØR IKKE fronten af masken, da den kan være kontamineret
- 2 Fjern ved at tage stropperne af ørerne
- 3 Smid masken ud som anvist af sundhedsfagligt personale og af anvisningerne for affaldshåndtering
- 4 Vask dine hænder

PPE Testing Standarder:

- Type IIR
- EN14683:2019
- CE mærket

Materialer:

- Tre lags konstruktion af ikke vævet filter materiale
- Elastik snore, placeret for at passe bag ørerne -påsat
- Indsat næseklip

Pakning:

- Pakning: 50 ansigtssmasker per boks, 20 bokse per karton

Oprindelsesland:

- Fremstillet i Storbritannien

Produktkode producent:

ORV+MA10N+04

Distributør varenr.:


5006010



✓ Opbevares et køligt sted, undgå sollys og placeret hævet fra gulvet.



Munnbind – Typ IIR BRUKSANVISNING NORWAY

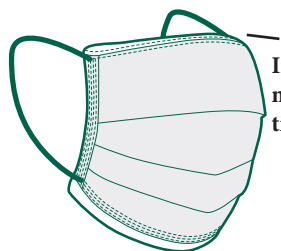

Innebygd
metallremse for
tilpasning over nese



Innebygd
metallremse
plassert korrekt
over nese



Sette på munnbindet

- 1 Åpne munnbindet
 - 2 Plasser munnbindet over munn og nese med metallremsen over neseryggen
 - 3 Plasser de elastiske remmene bak ørene
 - 4 Bruk hendene til å forme metallremsen over neseryggen til individuell passform
- VARSEL:** Om du ikke kan få en bra passform, ikke juster munnbindet fra innsiden!

Ta av munnbindet

- 1 IKKE RØR utsiden av munnbindet, Det kan være infisert.
- 2 Ta bort remmene bak ørene
- 3 Håndter brukte munnbind etter lokale forskrifter som gjelder for avfall som kan være infisert!
- 4 Vask hendene

PPE Testing Standards:

- Type IIR
- EN14683:2019
- CE marked

Materiale:

- Trelags konstruksjon av non-woven filtrations material
- Elastiske remmer
- Neselemme i metall

Pakket:

- Pakket: 50 munnbind per boks, 20 bokser per kartong

Opprinnelsesland:

- Made in the UK


Produsentens artnr:
ORV+MA10N+04
Distributørens artnr:
5006010




✓ Oppbevares svilt og tort,
beskyttes mot sollys.



Suu- ja nenäsuojus— Type IIR Käyttöohjeet

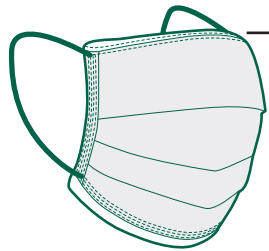

Metallinen
nenäklipsi

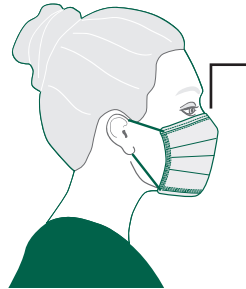

Metallinen
nenäklipsi
asennettu
na
poikittain
nenän
ylitse



SUU- JA NENÄSUOJUKSEN PUKEMINEN

- 1 Avaa suojus kokonaan
- 2 Aseta suojus nenän ja suun eteen, nenäklipsi ylöspäin.
- 3 Aseta joustavat kuminauhut korvien taakse.
- 4 Muotoile suojus tiiviiksi nenäklipsiä painamalla. Käytä molempia käsiäsi.

HUOMIO! Jos ET SAA suojusta tiiviiksi, ÄLÄ mene saastuneeseen tilaan.

SUU- JA NENÄSUOJUKSEN RIISUMINEN

- 1 ÄLÄ KOSKE suojuksen ulkopintaan. Se saattaa olla saastunut.
- 2 Riisu ottamalla kuminauhut korvien takaa.
- 3 Hävitä suojus annettujen ohjeiden mukaan.
- 4 Pese kätesi.

PPE Testi Standardit:

- Type IIR
- EN14683:2019
- CE merkitty

Materiaalit:

- Kolmikerroksinen rakenne, non-woven filtration material
- Joustavat korvaremmit
- Metallinen nenäklipsi

Pakkaus:

- Pakkaus: 50 maskia laatikossa, 20 laatikkoa kartongissa

Alkuperämaa:

- Made in UK

Valmistajan tuotenumero:

ORV+MA10N+04

Jakelijan tuotenumero:

5006010



✓ Säilytetään kuivassa ja viileässä, suojattuna auringonvalolta.

